

BORT X-Walker AIR kurz






Gebrauchsanweisung



Med
Mitten im
gesunden
Leben



Illustrationen
Figures

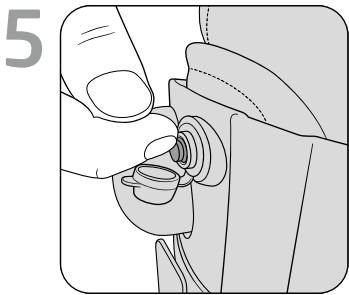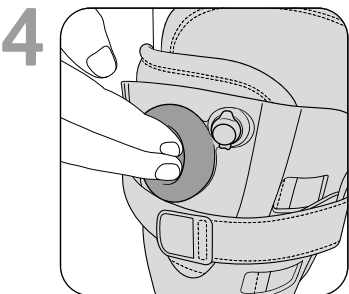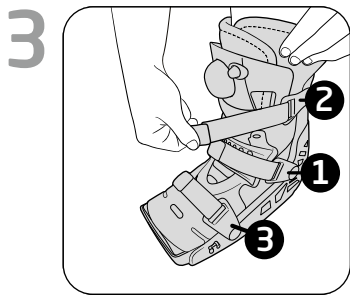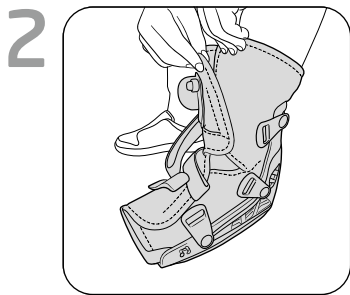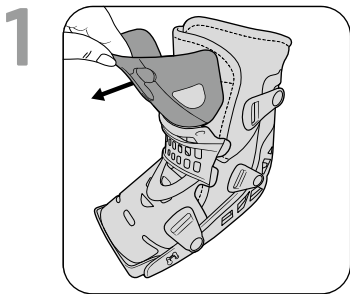

Sprachen Languages

DE	Deutsch	Gebrauchsanweisung	04
EN	English	Instructions for use	08
FR	Français	Mode d'emploi	11
ES	Español	Instrucciones de uso	15
IT	Italiano	Istruzioni per l'uso	19
NL	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	23
CS	Čeština	Návod k použití	27
ET	Eesti	Kasutusjuhend	30
PL	Polski	Instrukcja użytkowania	33
RO	Română	Instrucțiuni de utilizare	37

 PDF: ga.bort.com



Vielen Dank für das Vertrauen in ein Medizinprodukt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel, von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Unterschenkel-Fußorthese zur vollständigen Immobilisierung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position.

Indikationen

- DE:** Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfrakturen, Weichteilverletzungen, Distorsionen.
- AT:** Postoperative Versorgung nach multiplen Bandrupturen und Frakturen im Fußbereich, Wund- u. Knochenheilungsstörungen, Arthropathie.

Kontraindikationen

Thrombosegefahr, hochgradige Varikosis, periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Anwendungsrisiken / Wichtige Hinweise ⚠

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- Der Walker ist für ein maximales Körpergewicht von 130 kg geeignet
- Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden
- Bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- Gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- Keine Änderungen am Produkt vornehmen
- Nicht auf offenen Wunden tragen
- Nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- Während der Tragedauer der Orthese: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

Anziehanleitung

Verwenden Sie während der Tragezeit der Orthese bitte am betroffenen Fuß einen der beiden mitgelieferten Unterziehstrümpfe. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz.

1 Öffnen Sie die zirkulären Klettverschlüsse und nehmen Sie die frontale Abdeckung ab. Um das spätere Anlegen zu erleichtern, empfiehlt es sich die Klettbänder nach unten zu drehen, um den Einstieg in die Orthese zu erleichtern.

2 Öffnen Sie den Polsterliner und legen Sie Fuß und Unterschenkel in den Walker. Achten Sie auf guten Sitz der Ferse, diese sollte ganz hinten, sicher in der Fersenschale, positioniert sein. Anschließend wird der Polsterliner mittels Klettverschluss am Fuß und im Bereich des Unterschenkels verschlossen, achten Sie auf faltenfreien Sitz.

Hinweis für den Techniker:

Einstellung der Fußlänge:

Bei Bedarf kann die Fußlänge durch Versetzen des Zehenbügels an die Gegebenheiten des Patienten angepasst werden.

Hierzu wird der Zehenbügel angehoben und durch leichtes Ziehen nach oben entriegelt.

Anschließend kann dieser versetzt und durch leichten Druck nach unten in der gewünschten Position arretiert werden.

3 Adaptieren Sie nun die graue, frontale Abdeckung wieder mittig auf dem Polsterliner. Die Pumpe ist auf diesem aufgeklebt und sollte in der zentralen Aussparung der frontalen Anlage positioniert werden. Bei Bedarf können Sie die Position der Pumpe auf dem Polsterliner korrigieren.

Schließen Sie die vier zirkulären Klettverschlüsse in untenstehender Reihenfolge:

1. Beginnen Sie mit dem Verschluss am Sprunggelenk
 2. Schließen Sie den Unterschenkelverschluss
 3. Schließen Sie den Gurt im Mittelfuß-/Zehenbereich.
- Gegebenenfalls nochmals nachstraffen.

4 Um die Luft in den Liner zu pumpen und somit die Stabilisierung zu erzeugen, betätigen Sie nun einige Male die Pumpe bis Sie eine flächige Stabilisierung im Bereich des Unterschenkels und des Fußes spüren. Bei Bedarf straffen Sie die Verschlussbänder nochmals nach.

Lieferumfang:

BORT X-Walker AIR kurz inkl.:

- Liner X-Walker AIR kurz
- Unterziehstrumpf Walker (Paar)

Erhältliches Zubehör:

REF 100 370 BORT Unterziehstrumpf Walker

REF 100 380 BORT Nässeeschutzhülle

REF 100 390 BORT Schutzhülle für die Nacht

Ablegen

5 Zum Ablegen des Hilfsmittels entfernen Sie die Abdeckkappe seitlich der Pumpe und drücken den messingfarbenen Knopf nach unten. Die Luft strömt nun hörbar aus dem Polsterliner.

Anschließend die Gurtbänder öffnen, die frontale Abdeckung entfernen und den Liner öffnen, um die Orthese vom Bein zu nehmen.

Schließen Sie alle Klettverschlüsse, um Beschädigungen z. B. an anderen Kleidungsstücken zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

Orthesenschale:	100 % Polypropylen (PP)
Liner (Bezug):	35 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO), 30 % PUR-Schaum (PUR)
Verschlüsse:	100 % Polyamid (PA)
Unterziehstrümpfe:	88,5 % Baumwolle (CO), 9,0 % Polyamid (PA), 2,5 % Elasthan (EL)

Reinigungshinweise

 Handwäsche 30 °C  Nicht bleichen (nur mit Color- oder Feinwaschmittel waschen)

 Nicht im Wäschetrockner trocknen  Nicht bügeln  Nicht chemisch reinigen

Die Orthesenschale mit lauwarmem Wasser von Hand reinigen, den Linerbezug mit mildem Feinwaschmittel bei max. 30 °C von Hand waschen. An der Luft trocknen und dabei Hitzeeinwirkung vermeiden.

Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link:
www.bort.com/md-eu-kontakt.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/konformitaet

Stand: 10.2025

MD Medizinprodukt |  Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

Many thanks for placing your trust in a medical device from BORT GmbH. Please read the existing instructions for use carefully. If you have any questions, please refer to your physician or the specialist retailer from whom you purchased this medical device.

Intended purpose

This medical device is a lower leg foot brace for complete immobilisation of the lower leg and foot region in a specified position.

Indications

Pre-operative or post-operative/post-traumatic immobilisation of the forefoot and metatarsus region, metatarsal fracture, soft tissue injuries, distortions.

Contraindications

Thrombosis risk, extreme varicosis, peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymph drainage disorders, also unclear soft tissue swellings distal to the aid positioned, sensory and circulatory disorders of the region of the body treated, skin diseases in the part of the body treated.

Application risks/Important notes ⚠

This medical device is a prescribable product. Discuss the use and duration with your treating physician. The expert staff from whom you have received the medical device will select the appropriate size and instruct you regarding its use.

- remove the medical device prior to radiological examinations
- the Walker is appropriate for a maximum body weight of 130 kg
- if wearing at night is prescribed, avoid negative influence on the circulatory system
- in case of numbness, loosen the medical device and remove it if necessary
- in case of persistent complaints, consult the physician or specialist retailer
- use the medical device in accordance with therapeutic needs
- only use other products simultaneously after consultation with your physician
- do not make any changes to the product
- do not wear it on open wounds
- do not use in case of intolerance of one of the materials used
- no re-use. This medical aid is intended for treating one patient only
- whilst wearing the brace, please neither use any creams nor ointments on or around it as they can destroy the material

Fitting instructions

When wearing the brace, please wear one of the two understockings provided on the foot affected. Pay attention to it sitting crease-free.

- 1** Then, open the circumferential Velcro fasteners and remove the front cover. In order to make it easier to put on later, we recommend twisting the Velcro straps downwards, thus easing application of the brace.

2 Open the padding liner and place the foot and lower leg in the Walker. Pay attention to good heel positioning, it should be placed securely in the very back of the heel rest. The padding liner is then closed on the foot and in the lower leg region using the Velcro fastener, pay attention to it sitting crease-free.

Information for the technician:

Setting the foot length:

If required, the foot length can be adapted to the patient's circumstances by moving the front binding. For this purpose, the front binding is raised and pulled upwards gently to disengage it. Following this, it can be moved and be locked in the desired position by pressing it downwards gently.

3 Then, adapt the grey front cover again centrally on the padding liner. The pump is attached to it using Velcro and should be positioned in the central recess in the front fitting. If required, you can adapt the position of the pump on the padding liner.

Close the four circumferential Velcro fasteners in the order specified below:

1. Start with the fastener on the ankle joint.
2. Close the lower leg fastener.
3. Close the strap in the metatarsus/toe region.

If necessary, re-tighten again.

4 To pump the air into the liner and thus generate stabilisation, then activate the pump several times until you sense a surface stabilisation in the lower leg and foot region. If necessary, re-tighten the fastening straps again.

Scope of delivery:

BORT X-Walker AIR short incl.:

- Liner X-Walker AIR short
- Understocking Walker (pair)

Accessories available:

REF 100 370 BORT Understocking Walker

REF 100 380 BORT Protective cover against wetness

REF 100 390 BORT Protective cover for night-time

Removal

5 To remove the aid, remove the protective cap from the side of the pump and press the bronze-coloured button downwards. The air then flows out of the padding liner audibly. Then, open the harnesses, remove the front cover and open the liner to remove the brace from the leg. Close all the Velcro fasteners in order to avoid damaging other items, e.g. to further clothing.

Material composition

Brace rest:	100 % polypropylene (PP)
Liner (cover):	35 % polyester (PES), 35 % cotton (CO), 30 % pure ester (PUR)
Fasteners:	100 % polyamide (PA)
Understockings:	88,5 % cotton (CO), 9,0 % polyamide (PA), 2,5 % elastane (EL)

Cleaning information

 Hand-washing 30 °C  Do not bleach (only wash with colour or mild detergents)

 Do not dry in a tumble dryer  Do not iron  Do not clean chemically

Clean the brace rest manually with lukewarm water, wash the liner cover manually with mild detergents at a maximum of 30° C. Air dry whilst avoiding the impact of heat.

Guarantee

The legal regulations of the country in which you acquired the product apply to the purchased product. Please contact your specialist retailer if you suspect a warranty claim. Please clean the product before submitting a warranty claim. If the enclosed instructions for use have not been properly observed, the warranty may be impaired or cancelled. The warranty does not cover use of the product inappropriate for the indication, non-observance of application risks, instructions and unauthorised modifications to the product.

Useful life/Lifetime of the product

The lifetime of the medical device is determined by its natural wear and tear if treated appropriately and as recommended.

Duty of notification

If a serious worsening of the state of health occurs when using the medical device, you are obliged to notify the specialist dealer or us as the manufacturer and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

You can find our contact information in these instructions for use. You can find the contact information for the national authority responsible for your country under the following link: www.bort.com/md-eu-contact.

Disposal

Upon the termination of use, the product must be disposed of in accordance with the corresponding local requirements.

Declaration of conformity

We confirm that this device conforms with the requirements of REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. You can find the current declaration of conformity under the following link: www.bort.com/conformity

Status: 10.2025

 Medical device |  Single patient – multiple use

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'un des dispositifs médicaux de la société BORT GmbH. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. En cas de question, consultez votre médecin ou le magasin spécialisé qui vous a fourni ce dispositif médical.

Utilisation prévue

Ce dispositif médical est une orthèse de pied et de mollet permettant d'immobiliser entièrement la région du mollet et du pied en position prédéfinie.

Indications

Immobilisation pré-ou postopératoire/posttraumatique de la région de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, lésions des parties molles, distorsions.

Contre-indications

Risque de thrombose, varices importantes, artériopathie oblitérante périphérique (AOP), troubles de la circulation lymphatique y compris tuméfaction des tissus mous d'origine inconnue éloignée de l'aide posée, troubles de sensation et de la circulation sanguine des régions du corps traitées, maladies cutanées sur les zones traitées.

Risques inhérents à l'utilisation/Remarques importantes ⚠

Ce dispositif médical est un produit prescrit sur ordonnance. Consultez votre médecin prescripteur pour en connaître l'utilisation et la durée de port. Le choix de la taille ainsi qu'une présentation du produit seront réalisés par le personnel spécialisé qui vous fournira ce dispositif médical.

- retirer le dispositif médical avant les examens radiologiques
- le Walker est adapté à un poids corporel maximal de 130 kg
- en cas de prescription de port de nuit, éviter toute entrave à la circulation sanguine
- en cas de sensation d'engourdissement, desserrer ou retirer éventuellement le dispositif médical
- consulter un médecin ou un magasin spécialisé en cas de gêne persistante
- utiliser le dispositif médical conformément aux indications
- utilisation simultanée d'autres produits exclusivement sur avis de votre médecin
- ne pas modifier le produit
- ne pas porter sur des plaies ouvertes
- ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des matériaux utilisés
- ne pas réutiliser. Ce dispositif est conçu pour le soin d'un patient seulement.
- pendant le port de l'orthèse : ne pas utiliser de crème ou de pommade dans la zone d'utilisation du produit, risque de dommage du matériau

Instruction d'application

Pendant le port de l'orthèse, utilisez l'un des deux sous-bas fournis au niveau du pied concerné. Veillez à ce que le positionnement n'ait aucun pli.

1 Ouvrez ensuite les fermetures Velcro circulaires et retirez la protection frontale. Pour faciliter la pose ultérieure, il est conseillé de tourner les bandes Velcro vers le bas afin de faciliter l'entrée dans l'orthèse.

2 Ouvrez le revêtement en mousse et posez le pied et le mollet dans le Walker. Veillez à ce que le talon soit bien positionné. Il doit se trouver complètement à l'arrière, bien positionné dans la coque talonnière. Le revêtement en mousse est ensuite fixé à l'aide de la fermeture Velcro sur le pied et au niveau du mollet. Veillez à une mise en place sans pli.

Remarque destinée au technicien :

Réglage de la longueur du pied :

En cas de besoin, la longueur du pied peut être adaptée à la situation du patient via le déplacement de l'étrier d'orteils.

Pour ce faire, soulevez l'étrier d'orteils et déverrouillez-le en le tirant légèrement vers le haut.

L'étrier d'orteils peut être ensuite déplacé et bloqué dans la position souhaitée avec une légère pression vers le bas.

3 Ajustez maintenant la protection frontale grise à nouveau au milieu sur le revêtement en mousse. La pompe y est appliquée et doit être positionnée dans l'évidement central de la pose frontale. En cas de besoin, vous pouvez corriger la position de la pompe sur le revêtement en mousse.

Fermez les quatre fermetures Velcro circulaires dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. Commencez par la fermeture de l'articulation de la cheville.
 2. Fermez la fermeture du mollet.
 3. Fermez la sangle au niveau du métatarse/des orteils.
- Resserrez éventuellement.

4 Pour pomper l'air dans le revêtement et ainsi arriver à une stabilisation, actionnez la pompe plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez une stabilisation à plat au niveau du mollet et du pied. Si nécessaire, resserrez une nouvelle fois les bandes de fermeture.

Contenu de la livraison :

BORT X-Walker AIR court avec :

- Revêtement X-Walker AIR court
- Sous-bas Walker (paire)

Accessoires disponibles :

RÉF 100 370 BORT Sous-bas Walker

RÉF 100 380 BORT Housse de protection contre l'humidité

RÉF 100 390 BORT Housse de protection pour la nuit

Retirer

5 Pour retirer l'aide auxiliaire, enlevez le capuchon sur le côté de la pompe, puis appuyez sur le bouton couleur laiton. Vous entendrez alors l'air sortir du revêtement en mousse. Ouvrez ensuite les bandes de sangle, enlevez la protection frontale et ouvrez le revêtement pour retirer l'orthèse de la jambe. Fermez toutes les fermetures Velcro pour éviter d'endommager d'autres vêtements par exemple.

Composition des matières

Coque de l'orthèse :	100 % polypropylène (PP)
Revêtement (housse) :	35 % polyester (PES), 35 % coton (CO), 30 % ester PUR (PUR)
Fermetures :	100 % polyamide (PA)
Sous-bas :	88,5 % coton (CO), 9,0 % polyamide (PA), 2,5 % élasthanne (EL)

Conseils de lavage

 Lavage à la main 30 °C  Ne pas blanchir (laver exclusivement avec une lessive pour couleurs ou pour linge délicat)  Ne pas sécher au sèche-linge  Ne pas repasser  Ne pas nettoyer à sec. Nettoyer la coque de l'orthèse à la main et à l'eau tiède. Laver à la main la housse du revêtement avec une lessive douce pour linge délicat (max. 30 °C). Faire sécher à l'air libre et prévenir ici les effets de la chaleur.

Garantie

Les dispositions légales du pays dans lequel vous vous êtes procuré le produit sont applicables au produit acquis. Veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé si vous suspectez un cas relevant de la garantie. Veuillez nettoyer le produit avant de l'envoyer en cas de recours à la garantie. Si les présentes indications du mode d'emploi n'ont pas été suffisamment respectées, le recours à la garantie peut être impacté ou exclu. Le recours à la garantie est exclu en cas d'utilisation non conforme aux indications, en cas de non-respect des risques inhérents à l'utilisation, en cas d'instructions et de modifications du produit effectuées de votre propre initiative.

Durée d'utilisation/Durée de vie du produit

La durée de vie du dispositif médical est conditionnée par l'usure naturelle et par une utilisation appropriée et conforme.

Obligation de signalement

Si une détérioration grave de l'état de santé d'un patient se produit lors de l'utilisation du dispositif médical, veuillez en informer votre distributeur spécialisé ou nous avertir en tant que fabricant et avertir l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).

Nos coordonnées figurent dans le présent mode d'emploi. Vous trouverez les coordonnées de l'autorité nationale compétente de votre pays à l'adresse suivante : www.bort.com/md-eu-contact.

Élimination

Le produit doit être éliminé après son utilisation conformément aux dispositions locales. Déclaration de conformité Nous attestons que le présent produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. La déclaration de conformité actuelle figure dans le lien suivant : www.bort.com/conformity

État du : 10.2025

MD Dispositif médical |  Un seul patient – à usage multiple

Muchas gracias por confiar en un producto sanitario de BORT GmbH. Lea atentamente estas instrucciones de uso. Si le surge cualquier duda, consulte a su médico o al distribuidor especializado en el que ha adquirido este producto sanitario.

Uso previsto

Este producto sanitario es una órtesis de pierna y pie para la inmovilización completa de la región del pie y la pantorrilla en una posición predefinida.

Indicaciones

Inmovilización preoperatoria o postoperatoria/postrumática de la región del antepié y del metatarso, fractura metatarsiana, lesiones de los tejidos blandos, esguinces.

Contraindicaciones

Riesgo de trombosis, varices graves, enfermedad oclusiva arterial periférica (EOAP), trastornos del drenaje linfático, incluidas inflamaciones de los tejidos blandos de origen desconocido y en zonas alejadas de la zona donde se ha colocado el vendaje, trastornos de sensibilidad y del riesgo sanguíneo en la zona tratada, enfermedades de la piel en la zona tratada.

Riesgos de aplicación/Indicaciones importantes ⚠

Este producto sanitario es un producto prescribible. Hable con el médico que le ha recetado este producto acerca de su aplicación y duración. El personal especializado que le ha entregado el producto sanitario debe seleccionar el tamaño adecuado del producto y le explicará cómo debe usarlo.

- retire el producto sanitario antes de realizar un examen radiológico
- la bota Walker está diseñada para un peso máximo de 130 kg
- si se ha prescrito su uso durante la noche, evite que la circulación sanguínea se vea afectada
- en caso de entumecimiento, afloje el producto sanitario o retírelo de ser necesario
- en caso de molestias persistentes, consulte a su médico o distribuidor especializado
- emplee el producto sanitario de acuerdo con las indicaciones
- emplee simultáneamente con otros productos solo después de haberlo consultado con su médico
- no lleve a cabo ninguna modificación en el producto
- no lo lleve encima de heridas abiertas
- no lo emplee en caso de alergia a alguno de los materiales utilizados
- no lo reutilice. Este producto está destinado al cuidado de un solo paciente
- durante el período de uso de la órtesis, no aplique ninguna crema ni pomada en la zona donde se encuentra la órtesis, pues puede dañar el material

Instrucciones de colocación

Mientras lleve puesta la órtesis, utilice en el pie afectado una de las dos medias interiores incluidas. Asegúrese de que no se forman arrugas.

1 Abra los cierres de velcro circulares y retire la cubierta frontal. Para facilitar la colocación posterior, se recomienda girar hacia bajo las cintas de velcro para poder introducir el pie en la órtesis con más facilidad.

2 Abra la almohadilla e introduzca el pie y la pantorrilla en la bota Walker. Asegúrese de que el talón queda correctamente asentado; debe quedar posicionado totalmente atrás y de forma segura en la cubierta del talón. A continuación, cierre la almohadilla en el pie y en la zona de la pantorrilla mediante el cierre de velcro, asegurándose de que no se formen arrugas.

Nota para el técnico:

Ajuste de la longitud del pie:

En caso necesario, la longitud del pie puede adaptarse a las características anatómicas del paciente desplazando el estribo para los dedos.

Para ello, eleve el estribo para los dedos y bloquéelo tirando ligeramente hacia arriba.

A continuación, desplace este y presione ligeramente hacia abajo para bloquearlo en la posición deseada.

3 Vuelva a adaptar ahora la cubierta frontal gris centrándola sobre la almohadilla. La bomba está fijada con velcro sobre dicha almohadilla y debe colocarse en la cavidad central de la parte delantera. En caso necesario, puede corregir la posición de la bomba sobre la almohadilla.

Cierre los cuatro cierres de velcro circulares en la secuencia que se indica a continuación:

1. Comience con el cierre de la articulación del tobillo.
2. Cierre el cierre de la pantorrilla.
3. Cierre la correa en la región del metatarso/de los dedos del pie.

En caso necesario, apriete de nuevo.

4 Para bombear aire al forro y, de este modo, conseguir una mayor estabilidad, accione ahora la bomba varias veces hasta que perciba una estabilización en toda la superficie de la región de la pantorrilla y del pie. En caso necesario, vuelva a tensar las cintas de cierre.

Volumen de suministro:

BORT X-Walker AIR corta inclusive:

- Forro de la X-Walker AIR corta
- Media interior Walker (par)

Accesorios disponibles:

REF 100 370 BORT Media interior Walker

REF 100 380 BORT Funda protectora impermeable

REF 100 390 BORT Funda protectora para la noche

Retirar

5 Para retirar la órtesis, retire la cubierta protectora situada en el lateral de la bomba y presione hacia abajo el botón de color latón. El aire sale ahora de forma audible de la almohadilla.

A continuación, abra las correas, retire la cubierta frontal y abra el forro para retirar la órtesis de la pierna. Cierre todos los cierres de velcro para no dañar otras prendas al lavar el producto.

Composición de los materiales

Cubierta de la órtesis:	100 % polipropileno (PP)
Forro (funda):	35 % poliéster (PES), 35 % algodón (CO), 30 % poliuretano-éster (PUR)
Cierres:	100 % poliamida (PA)
Medias interiores:	88,5 % algodón (CO), 9,0 % poliamida (PA), 2,5 % elastano (EL)

Indicaciones de lavado

 Lavado a mano 30 °C  No usar blanqueador (lavar solo con detergente para color o para prendas delicadas)  No secar en la secadora  No planchar  No lavar en seco

Lave a mano la cubierta de la órtesis con agua tibia y la funda, con un detergente suave a una temperatura máxima de 30 °C. Deje secar al aire libre, pero evitando la exposición directa al calor.

Garantía

Para el producto adquirido se aplican las disposiciones legales del país en el que se ha adquirido el producto. Si sospecha de un caso de garantía, contacte con su distribuidor especializado. Antes de presentar la reclamación de garantía, lave el producto. Si no se han seguido debidamente las indicaciones de las instrucciones de uso, la garantía puede verse afectada o perder su validez. Quedan excluidos de la garantía el uso no conforme a las indicaciones, así como la inobservancia de los riesgos de aplicación o de las indicaciones y las modificaciones no autorizadas en el producto.

Duración de utilización/Vida útil del producto

Si el producto sanitario se maneja y utiliza debidamente, su vida útil viene determinada por el desgaste natural.

Obligación de notificación

Si se produce un incidente que provoque un empeoramiento importante del estado de salud del paciente durante el uso del producto sanitario, notifique el hecho a su distribuidor, a nosotros, el fabricante, o a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

Encontrará nuestros datos de contacto en estas instrucciones de uso. Para conocer los datos de contacto de la autoridad nacional competente de su país, visite el siguiente enlace: www.bort.com/md-eu-contact.

Eliminación

Al final de la vida útil, el producto debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.



Declaración de conformidad

Confirmamos que este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración de conformidad actual puede consultarse en el siguiente enlace: www.bort.com/conformity

Versión: 10.2025

MD Producto sanitario |  Un solo paciente – uso múltiple

La ringraziamo per aver preferito un dispositivo medico di BORT GmbH. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. In caso di domande, contattare il medico o il rivenditore specializzato da cui è stato ricevuto questo dispositivo medico.

Destinazione

Questo dispositivo medico è un'ortesi gamba-piede per la completa immobilizzazione della parte inferiore della gamba e del piede in una posizione predeterminata.

Indicazioni

Immobilizzazione pre- o postoperatoria/postraumatica dell'avampiede e del mesopiede, frattura del metatarso, lesioni dei tessuti molli, distorsioni.

Controindicazioni

Rischio di trombosi, varicosi grave, arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori, anche poco evidenti, dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.

Rischi correlati all'applicazione/Avvertenze importanti

Questo dispositivo medico è un prodotto prescrivibile. Chiedere informazioni sull'uso e la durata al medico prescrittore. La selezione della misura e delle istruzioni adatte è effettuata dallo specialista da cui ha ricevuto il dispositivo medico.

- rimuovere il dispositivo medico prima di sottoporsi ad esami radiologici
- il tutore Walker è adatto per un peso corporeo massimo di 130 kg
- nel caso sia stato prescritto di indossarlo nelle ore notturne, fare in modo di evitare di limitare la circolazione sanguigna
- in caso di intorpidimento, allentare o, se necessario, rimuovere il dispositivo medico
- se i sintomi persistono, consultare un medico o un rivenditore specializzato
- utilizzare il dispositivo medico secondo le indicazioni
- l'uso simultaneo di altri prodotti può avvenire solo dopo aver consultato il suo medico
- non apportare alcuna modifica al prodotto
- non indossare su ferite aperte
- non utilizzare in caso di incompatibilità con uno dei materiali utilizzati
- non è consentito il riutilizzo del prodotto – il presente ausilio è destinato al trattamento di un solo paziente
- durante il periodo d'uso dell'ortesi: evitare l'applicazione locale di creme o unguenti nella zona di applicazione dell'ausilio, perché può danneggiare il materiale

Istruzioni per indossare l'articolo

Durante l'uso dell'ortesi, indossare sul piede interessato una delle due sottocalze fornite. Fare attenzione che non vi siano pieghe.

1 Quindi aprire le chiusure circolari in velcro e rimuovere la copertura frontale. Per facilitare l'inserimento dell'ortesi in un secondo momento, si consiglia di girare le bande in velcro verso il basso per facilitare l'accesso all'ortesi.

2 Aprire l'imbottitura e mettere il piede e la parte inferiore della gamba nel tutore Walker. Fare attenzione che il tallone sia appoggiato bene, deve essere posizionato saldamente nella parte posteriore, nel guscio per il tallone. Poi chiudere l'imbottitura utilizzando la chiusura in velcro sul piede e nella zona della parte inferiore della gamba, fare attenzione che non vi siano pieghe.

Nota per il tecnico:

Regolazione della lunghezza del piede:

Se necessario, la lunghezza del piede può essere adattata alle condizioni del paziente spostando il puntale. A tal fine, il puntale deve essere sollevato e sbloccato tirandolo delicatamente verso l'alto. È quindi possibile spostarlo e bloccarlo nella posizione desiderata esercitando una leggera pressione verso il basso.

3 Adattare ora di nuovo la copertura frontale grigia al centro sull'imbottitura. La pompa vi è fissata sopra con velcro e deve essere posizionata nell'alloggiamento centrale della parte anteriore dell'ortesi. Se necessario, è possibile correggere la posizione della pompa sull'imbottitura.

Chiudere le quattro chiusure in velcro circolari attenendosi alla seguente sequenza:

1. Iniziare con la chiusura alla caviglia.
2. Allacciare la chiusura della parte inferiore della gamba.
3. Chiudere la cinghia nella zona del metatarso/delle dita del piede.

Se necessario aumentare la tensione.

4 Per pompare l'aria nella fodera e creare così la stabilizzazione, azionare la pompa più volte finché non si percepisce una stabilizzazione uniforme nella parte inferiore della gamba. Se necessario, stringere nuovamente le fasce di chiusura.

Contenuto della confezione:

BORT X-Walker AIR corto include:

- Fodera X-Walker AIR corto
- Sottocalza Walker (un paio)

Accessori disponibili:

Codice 100 370 BORT Sottocalza Walker

Codice 100 380 BORT Rivestimento protettivo contro l'umidità

Codice 100 390 BORT Custodia per la notte

Rimozione

5 Per rimuovere l'ausilio, togliere il tappo di copertura sul lato della pompa e premere verso il basso il pulsante color ottone. A questo punto si sente fuoriuscire l'aria dall'imbottitura. Aprire quindi i cinturini, estrarre la copertura anteriore e aprire la fodera per rimuovere l'ortesi dalla gamba. Chiudere tutte le chiusure in velcro per evitare di danneggiare p. es. altri capi di abbigliamento.

Composizione dei materiali

Guscio dell'ortesi:	100 % polipropilenica (PP)
Fodera (rivestimento):	35 % poliestere (PES), 35 % cotone (CO), 30 % poliuretano estere (PUR)
Chiusure:	100 % poliammide (PA)
Sottocalze:	88,5 % cotone (CO), 9,0 % poliammide (PA), 2,5 % elastan (EL)

Istruzioni per la pulizia

 Lavaggio a mano 30 °C  Non candeggiare (lavare solo con detersivo per capi colorati o detersivo neutro)  Non asciugare in asciugatrice  Non stirare  Non lavare a secco
Pulire il guscio dell'ortesi a mano con acqua tiepida; lavare la fodera di rivestimento a mano con un detersivo delicato a massimo 30 °C. Asciugare all'aria ed evitare l'esposizione al calore.

Garanzia

Per il prodotto acquistato si applicano le leggi del Paese in cui è stato comprato. Se si sospetta un difetto che giustifica una richiesta di intervento in garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Si raccomanda di pulire il prodotto prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia. Se le indicazioni delle istruzioni per l'uso non sono state adeguatamente rispettate, la garanzia potrebbe essere compromessa o annullata. La garanzia è esclusa in caso di utilizzo non conforme alle indicazioni, inosservanza dei rischi correlati all'applicazione e delle indicazioni, come pure in caso di modifiche non autorizzate al prodotto.

Vita utile/durata utile del prodotto

La durata utile del dispositivo medico è determinata dall'usura naturale se maneggiato correttamente e in conformità alle istruzioni per l'uso.

Obbligo di segnalazione

In caso di grave deterioramento dello stato di salute durante l'utilizzo del dispositivo medico, segnalarlo al rivenditore specializzato o a noi in quanto produttori, inoltre in Italia anche al Ministero della Salute. I nostri dati di recapito si trovano in queste istruzioni per l'uso. I dati di recapito della autorità nazionale competente nel rispettivo Paese sono indicati nel seguente link: www.bort.com/md-eu-contact.

Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative locali.



Dichiarazione di conformità

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. La dichiarazione di conformità aggiornata si trova al seguente link: www.bort.com/conformity

Aggiornato al: 10.2025

MD Dispositivo medico |  Singolo paziente – uso multiplo

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in een medisch hulpmiddel van BORT GmbH. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw arts of de vakhandel waar u dit medische hulpmiddel gekocht hebt.

Beoogd gebruik

Dit medische hulpmiddel is een orthese voor het onderbeen en de voet voor een volledige immobilisatie van de voet-onderbeenregio in een bepaalde positie.

Indicaties

Pre- of postoperatieve/posttraumatische immobilisatie van de voorvoet- en middenvoetregio, metatarsale fracturen, letsels van weke delen, distorsies.

Contra-indicaties

Tromboserisico, ernstige spataderen, perifere arterieel vaatlijden (PAV), stoornissen van de lymfe-afvoer en bij onverklaard oedeem van weke delen distaal van het aangelegde hulpmiddel, overgevoeligheds- en doorbloedingsstoornissen van het te behandelen lichaamsdeel, huidandoeningen van het te behandelen lichaamsdeel.

Gebruiksrisico's/belangrijke instructies

Dit medische hulpmiddel is een product dat op voorschrift wordt geleverd. Bespreek het gebruik en de gebruiksduur met de arts die u dit hulpmiddel voorschrijft. De vakhandel bij wie u het hulpmiddel koopt, kiest de juiste maat van het hulpmiddel en geeft u de gebruiksinstructies.

- dit medische hulpmiddel moet voorafgaand aan radiologische onderzoeken worden afgedaan
- de Walker is geschikt voor een lichaamsgewicht van maximaal 130 kilo
- als voorgeschreven is dit hulpmiddel 's nachts te dragen, moet belemmering van de bloedcirculatie vermeden worden
- bij een doof gevoel moet dit medische hulpmiddel losser worden aangebracht of worden afgedaan
- raadpleeg uw arts of de vakhandel bij aanhoudende klachten
- dit medische hulpmiddel mag alleen conform de indicaties worden gebruikt
- gelijktijdig gebruik van andere producten uitsluitend na overleg met uw arts
- breng geen veranderingen aan het hulpmiddel aan
- niet dragen op open wonden
- niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor een van de gebruikte materialen
- niet geschikt voor hergebruik: dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor het behandelen van één patiënt
- breng tijdens de draagduur van de orthese geen crème of zalf aan op de huid onder het aangelegde hulpmiddel omdat dit het materiaal kan aantasten

Aanwijzingen voor het aantrekken

Gebruik bij het dragen van de orthese een van de twee meegeleverde onderkousen voor de betreffende voet. Let er daarbij op dat er geen plooien ontstaan.

1 Open alle circulair verlopende klittenbandsluitingen en neem de afdekking aan de voorkant af. Om het daaropvolgende aanleggen te vereenvoudigen, wordt aanbevolen de klittenbandsluitingen naar beneden om te draaien om het instappen in de orthese te vergemakkelijken.

2 Open de polstervoering en leg de voet en het onderbeen in de Walker. Let erop dat de hiel goed in de Walker zit. De hiel moet helemaal naar achteren, goed in de hielschaal, gepositioneerd zijn. Sluit hierna de polstervoering door middel van de klittenbandsluiting bij de voet en het onderbeen. Let er daarbij op dat er geen plooien ontstaan.

Opmerking voor de orthopedisch instrumentmaker:

Instelling van de lengte van de voet:

Indien nodig kan de lengte van de voet worden aangepast door de teenbeugel te verstellen op de kenmerken van de patiënt.

Hiervoor pakt u de teenbeugel en ontgrendelt u deze door hem iets omhoog te trekken.

Stel de beugel nu af en vergrendel hem weer door hem in de gewenste positie iets naar beneden te drukken.

3 Breng nu de grijze afdekking aan de voorkant weer midden op de polstervoering aan. De pomp is hierop vastgeplakt en dient in de middelste uitsparing van het voorste aangelegde deel te worden gepositioneerd. Indien nodig kunt u de positie van de pomp op de polstervoering corrigeren.

Sluit de vier circulaire klittenbandsluitingen in onderstaande volgorde.

1. Begin met de sluiting over de enkel.
2. Sluit de sluiting op het onderbeen
3. Sluit de band op de middenvoet bij de tenen.

Trek deze indien nodig nogmaals aan.

4 Om lucht in de voering te pompen en op die manier stabiliteit te creëren, bedient u de pomp slechts een paar keer totdat u een egale stabilisatie rond het onderbeen en de voet voelt. Indien nodig trekt u de sluitbanden nog extra aan.

Levering:

BORT X-Walker AIR kort incl.:

- Voering X-Walker AIR kort
- Onderkous voor Walker (paar)

Verkrijgbare accessoires:

REF 100 370 BORT-onderkous voor Walker

REF 100 380 BORT-beschermhoes tegen vocht

REF 100 390 BORT-beschermhoes voor de nacht

Afnemen

5 Om het hulpmiddel af te nemen, verwijdt u de afdekking aan de zijkant van de pomp en duwt u de messingkleurige knop omlaag. De lucht stroomt nu hoorbaar uit de polstervoering.

Open vervolgens de sluitbanden, verwijder de afdekking van de voorkant en open de voering om de orthese van het been af te nemen.

Sluit alle klittenbandsluitingen om beschadiging van bijvoorbeeld andere kleding te voorkomen.

Materiaalsamenstelling

Ortheseschaal:	100 % polypropyleen (PP)
Voering (overtrek):	35 % polyester (PES), 35 % katoen (CO), 30 % PUR-ester (PUR)
Sluitingen:	100 % polyamide (PA)
Onderkousen:	88,5 % katoen (CO), 9,0 % polyamide (PA), 2,5 % elastaan (EL)

Reinigingsinstructies

 Handwas 30 °C  Geen bleekmiddel gebruiken (uitsluitend met kleur- of fijnwasmiddelen wassen)

 Niet drogen in de wasdroger  Niet strijken  Niet chemisch reinigen

Ortheseschaal met de hand wassen met lauwwarm water, de voeringovertrek met een mild fijnwasmiddel op max. 30 °C met de hand wassen. Aan de lucht drogen en daarbij invloed van hitte vermijden.

Garantie

Voor het gekochte hulpmiddel gelden de wettelijke bepalingen van het land waarin u het hulpmiddel hebt gekocht. Raadpleeg uw vakhandel als u aanspraak wilt maken op garantie. Reinig het hulpmiddel voordat u het terugbrengt voor een garantieclaim. Als de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies niet of onvoldoende in acht worden genomen, kan de garantie worden beperkt of nietig worden verklaard. Bij gebruik voor een hier niet vermelde indicatie, bij veronachtzaming van de gebruiksrisico's en -instructies, en bij eigenhandig uitgevoerde veranderingen, is de garantie nietig.

Gebruiks- en levensduur van het hulpmiddel

De levensduur van dit medische hulpmiddel wordt bepaald door de natuurlijke slijtage bij vakkundig gebruik conform de indicatie.

Meldplicht

Als het gebruik van dit medische hulpmiddel leidt tot een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand, moet u dit melden aan uw vakhandel of aan ons als fabrikant, maar ook aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

U vindt onze contactgegevens in deze gebruiksaanwijzing. De contactgegevens van de verantwoordelijke nationale instantie van uw land vindt u via de volgende link: www.bort.com/md-eu-contact.

Weggooiden

Wanneer de levensduur van het hulpmiddel is verstreken, moet dit hulpmiddel conform de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

Conformiteitsverklaring

Wij bevestigen dat dit hulpmiddel voldoet aan de eisen van VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. De actuele conformiteitsverklaring vindt u via de volgende link: www.bort.com/conformity

Versie: 10-2025

 Medisch hulpmiddel |  Eén patiënt – meervoudig gebruik

Velice děkujeme za důvěru ve zdravotnický prostředek od společnosti BORT GmbH. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Máte-li dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo specializovaného prodejce, od kterého jste tento zdravotnický prostředek obdrželi.

Účel použití

Tento zdravotnický prostředek je ortéza bérce a chodidla, která slouží k úplné imobilizaci oblasti bérce a chodidla v předepsané poloze.

Indikace

Předoperační nebo pooperační/posttraumatické znehybnění oblasti přední části chodidla a nártu, metatarzální fraktura, zranění měkkých tkání, distorze.

Kontraindikace

Riziko trombózy, varikóza vysokého stupně, periferní arteriální okluzivní onemocnění (PAD), poruchy odtoku lymfy a také nejasné otoky měkké tkáně distálně od přiložené pomůcky, senzorické a oběhové poruchy ošetřené oblasti těla, kožní onemocnění v ošetřené části těla.

Rizika aplikace / důležité pokyny

Tento zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis. Aplikaci a dobu trvání si dohodněte se svým předepisujícím lékařem. Výběr vhodné velikosti a poučení provádí odborný personál, od kterého jste zdravotnický prostředek obdrželi.

- před radiologickým vyšetřením zdravotnický prostředek odložte
- Walker je určen pro maximální tělesnou hmotnost 130 kg
- bylo-li předepsáno nošení v noci, zabraňte negativnímu ovlivnění krevního oběhu
- v případě znecitlivění zdravotnický prostředek uvolněte nebo případně sejměte
- pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře nebo specializovaného prodejce
- zdravotnický prostředek používejte podle indikací
- současné použití jiných výrobků je dovoleno pouze po konzultaci s vaším lékařem
- na výrobku neprovádějte žádné změny
- nenoste na otevřených ranách
- nepoužívejte při nesnášenlivosti s některým použitým materiálem
- nepoužívejte opakovaně – tato pomůcka je určena k ošetření pouze jednoho pacienta
- během období nošení ortézy: žádná lokální aplikace krémů nebo masť v oblasti nasazené pomůcky – může zničit materiál

Návod k navlečení

Během nošení ortézy použijte na postižené chodidlo jednu z obou dodaných podvlékačích punčoch. Dbejte na to, aby nikde nebyly žádné přehyby.

- 1** Následně rozepněte kruhové uzávěry se suchým zipem a sejměte přední kryt. Pro pozdější snadnější přiložení se doporučuje otočit pásy se suchými zipy směrem dolů, aby se ortéza lépe nasazovala.

2 Rozevřete polstrující vložku a vložte chodidlo a bérce do Walkeru. Dávejte pozor na správnou polohu paty, ta by měla být umístěna zcela vzadu, pevně ve skořepině na patu. Polstrující vložka se poté uzavře pomocí suchého zipu na chodidlo a v oblasti bérce; dbejte na to, aby nikde nebyly žádné přehyby.

Upozornění pro technika:

Nastavení délky chodidla:

V případě potřeby lze délku chodidla přizpůsobit podmínkám pacienta posunutím úchytu na prsty.

Za tímto účelem se úchyt na prsty zvedne a odemkne jemným tahem směrem nahoru.

Mírným tlakem směrem dolů jej lze poté posunout a zajistit v požadované poloze.

3 Nyní upravte šedý čelní kryt opět doprostřed polstrující vložky. Pumpička je na ní připevněna suchým zipem a měla by být umístěna v centrálním vybrání přední podložky. V případě potřeby lze polohu pumpičky na polstrující vložce korigovat.

Zapněte čtyři kruhové uzávěry se suchým zipem v níže uvedeném pořadí:

1. Začněte uzávěrem na hlezenním kloubu.

2. Zapněte uzávěr bérce.

3. Zapněte popruh v oblasti nártu/prstů.

V případě potřeby ještě jednou dotáhněte.

4 Chcete-li napumpovat vzduch do vložky a tím zajistit stabilizaci, několikrát stiskněte pumpičku, dokud neucítíte plošnou stabilizaci v oblasti bérce a chodidla. V případě potřeby ještě jednou dotáhněte uzavírací pásky.

Rozsah dodávky:

BORT X-Walker AIR krátký vč.:

– vložka X-Walker AIR krátký

– podvlékač punčocha Walker (pár)

Dostupné příslušenství:

REF 100 370 BORT Podvlékač punčocha Walker

REF 100 380 BORT Ochranný obal proti vlhku

REF 100 390 BORT Ochranný obal na noc

Odložení

5 Chcete-li pomůcku odložit, sejměte kryt ventilu na boku pumpičky a stiskněte mosazně zbarvené tlačítko směrem dolů. Vzduch nyní slyšitelně proudí z polstrující vložky.

Poté rozeptejte popruhy, sejměte přední kryt a otevřete vložku, abyste sundali ortézu z nohy.

Zapněte všechny uzávěry se suchým zipem, aby nedošlo k poškození například na jiných částech oděvu.

Složení materiálu

Skořepina ortézy:	100 % polypropylen (PP)
Vložka (potah):	35 % polyester (PES), 35 % bavlna (CO), 30 % PUR ester (PUR)
Uzávěry:	100 % polyamid (PA)
Podvlékač punčochy:	88,5 % bavlna (CO), 9,0 % polyamid (PA), 2,5 % elastan (EL)

Pokyny k čištění

ruční praní 30 °C nebělit (prát pouze v pracím prostředku na barevné prádlo nebo jemném pracím prostředku) nesušit v sušičce nežehlit nečistit chemicky

Skořepinu ortézy vyčistěte ručně vlažnou vodou a potah vložky omyjte ručně jemným pracím prostředkem při max. 30 °C. Vysušte na vzduchu a zamezte působení tepla.

Záruka

Pro zakoupený výrobek platí zákonná ustanovení země, ve které jste výrobek zakoupili. V případě podezření na záruční případ se obraťte na svého specializovaného prodejce. Před uplatněním záruky výrobek vyčistěte. Pokud přiložené pokyny k návodu k použití nebyly dostatečně dodrženy, může být záruka omezena nebo zaniká. Vyloučeno je záruční plnění při použití v rozporu s indikacemi, nedodržení aplikačních rizik, pokynů a svévolném provedení změn na výrobku.

Doba použití/životnost výrobku

Životnost zdravotnického prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

Oznamovací povinnost

Dojde-li při používání zdravotnického prostředku k vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, oznamte to svému odbornému prodejci nebo nám coby výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Naše kontaktní údaje naleznete v tomto návodu k použití. Kontaktní údaje příslušného národního úřadu ve vaší zemi naleznete pod následujícím odkazem: www.bort.com/md-eu-contact.

Likvidace

Po ukončení použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že tento výrobek splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745. Aktuální prohlášení o shodě naleznete na následujícím odkazu: www.bort.com/conformity

Stav: 10.2025

Zdravotnický prostředek | Jeden pacient – vícenásobné použití

Täname BORT GmbH meditsiiniseadme usaldamise eest. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Küsimuste korral pöörduge oma arsti või edasimüüja poole, kelle käest selle meditsiiniseadme saite.

Otstarve

See meditsiiniseade on sääre ja labajala ortoos sääre ja labajala piirkonna täielikuks immobilisatsiooniks määratud asendis.

Näidustused

Operatsioonieelne/-järgne/traumajärgne labajala põia- ja keskosa fikseerimine, metatarsaalluude murd, pehmete kudede vigastused, nihestused.

Vastunäidustused

Tromboosioht, kaugelearenenud veenilaiendid, perifeerne arterite oklusioonhaigus, lümfiringehäired, ka ebaselge põhjusega pehmete kudede tursed paigaldatud abivahendist eemal asuvates kehaosades, sensoorsed ja verevarustushäired vastavas keha piirkonnas, nahahaigused vastaval kehaosal.

Kasutamise seotud ohud/olulised juhised ⚠

Käesolev meditsiiniseade on toode, mis on teatavatel juhtudel väljastatav retsepti alusel. Konsulteerige oma arstiga kasutamise ja kestuse suhtes. Sobiva suuruse valib ja toote kasutamist juhendab eripersonal, kellelt meditsiiniseadme saite.

- eemaldage meditsiiniseade enne radioloogilisi uuringuid
- Walkerit sobib kasutada kehakaaluga kuni 130 kg
- kui määratud on kandmine öösel, vältige vereringe mõjutamist
- tundetuse korral lõdvendage meditsiiniseadet või võtke see ära
- kaebuste püsimise korral võtke ühendust arsti või edasimüüjaga
- kasutage meditsiiniseadet näidustuste kohaselt
- muude toodete samaaegne kasutamine üksnes kokkuleppel teie arstiga
- ärge muutke toodet
- mitte kanda lahtistel haavadel
- ärge kasutage mõne kasutatud materjali talumatuse korral
- ei ole taaskasutatav – käesolev abivahend on mõeldud üksnes ühe patsiendi jaoks
- ortoosi kandmise ajal: ärge kasutage paigaldatud abivahendi piirkonnas lokaalselt kreeme ega salve, see võib materjali hävitada

Paigaldusjuhised

Ortoosi kandmise ajal kasutage ravitaval jalal ühte kahest kaasasolevast sokist. Jälgige, et ei oleks kortse.

1 Seejärel avage ümbritsevad takjakkinnised ja eemaldage eesmine kate. Ortoosi hilisema paigaldamise hõlbustamiseks on soovitatav keerata takjakkinnised alla, et hõlbustada ortoosi astumist.

2 Avage polsterdus ning asetage labajalg ja sääär Walkerisse. Veenduge, et kand istub hästi, see peaks asetsema täiesti taga, kindlalt kanna pesas. Seejärel suletakse polsterdus labajala ja sääre piirkonnas takjakinnisega. Jälgige, et ortoos ei oleks kortsus.

Märkus tehnikule

Jala pikkuse seadistamine:

Vajaduse korral saab jala pikkust kohandada patsiendi omadustele, nihutades varbatuge. Selleks tõstetakse varbatugi üles ja kergelt tõmmates vabastatakse see lukustusest. Seejärel saab seda nihutada ja lukustada soovitud asendisse, avaldades kerget survet allapoole.

3 Kohandage nüüd hall eesmine kate uuesti polsterduse keskele. Pump kinnitatakse selle külge ja see tuleb paigutada esisüsteemi keskmisesse süvendisse. Vajaduse korral saate korrigeerida pumba asendit polsterdusel.

Sulgege neli ümbritsevat takjakinnist alljärgnevas järjekorras.

1. Alustage hüppeliigese juures asuva sulguri kinnitamisega.
2. Sulgege sääreosa kinnis.
3. Sulgege rihm põia/varvaste piirkonnas.

Vajadusel pingutage veel kord üle.

4 Selleks et pumbata õhku vooderdisse ja seeläbi stabiliseerida, vajutage pumba paar korda, kuni tunnete stabiliseerumist kogu alasääre ja jala piirkonnas. Vajaduse korral pingutage kinnitusrihmad uuesti.

Tarnekomplekt:

BORT X-Walker AIR lühike, sh:

- Liner X-Walker AIR lühike
- Alussukk Walker (paar)

Saadaolevad tarvikud:

- REF 100 370 BORTi alussukk Walker
- REF 100 380 BORTi niiskuse eest kaitsev kest
- REF 100 390 BORTi õine kaitseümbris

Eemaldamine

5 Abivahendi äravõtmiseks eemaldage pumba küljel olev katekork ja vajutage messingu värvi nuppu allapoole. Õhk voolab nüüd kuuldavalt polsterdusest välja.

Seejärel avage rihmad, eemaldage eesmine kate ja avage polsterdus, et ortoos jalalt ära võtta.

Sulgege kõik takjakinnised, et vältida nt teiste rõivaesemete kahjustamist.

Koostis

Ortoosi kest:	100 % polüpropeen (PP)
Polsterdus (kate):	35 % polüester (PES), 35 % puuvill (CO), 30 % PUR-ester (PUR)
Kinnised:	100 % polüamiid (PA)
Alussukad:	88,5 % puuvill (CO), 9,0 % polüamiid (PA), 2,5 % elastaan (EL)

Puhastamisjuhised

 Käsipesu 30 °C  Mitte pleegitada (pesta üksnes värvilise pesu pesemiseks mõeldud pulbri või pehmetoimelise pesuvahendiga)  Mitte kuivatada pesukuivatis  Mitte triikida

 Mitte keemiliselt puhastada

Peske ortoosi kesta käsitsi leige veega, peske voodrikatet käsitsi õrnatoimelise pesuvahendiga max temperatuuril 30 °C. Kuivatage õhu käes ja vältige kuumuse mõju.

Garantii

Omandatud tootele kehtivad selle riigi seadusesätted, kus olete toote hankinud. Garantiinõude kahtluse korral pöörduge oma edasimüüja poole. Puhastage toodet enne garantiinõude esitamist. Kui kasutusjuhendi juhiseid ei järgitud piisavalt, võib see mõjutada garantiid või selle tühistada. Garantiioigus on välistatud muul kui näidustuste kohasel kasutamisel, kasutamisega seotud ohtude, juhiste eiramisel, samuti toote omavoliliste muudatuste tegemisel.

Toote kasutusiga

Meditasiiniseadme kasutusea määrab loomulik kulumine asja- ja nõuetekohasel kasutamisel.

Teatamiskohustus

Kui meditsiiniseadme kasutamisel halveneb tervislik seisund olulisel määral, teavitage sellest oma edasimüüjat või meid kui tootjat ning ka Eesti Terviseametit.

Meie kontaktandmed leiate käesolevast kasutusjuhendist. Pädeva riikliku asutuse kontaktandmed teie riigis saate järgmiselt veebiaadressilt: www.bort.com/md-eu-contact.

Jäätmekäitlus

Pärast kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

Vastavusdeklaratsiooni

Kinnitame, et käesolev toode vastab EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) 2017/745 nõuetele. Kehtiva vastavusdeklaratsiooni leiate järgmiselt lingilt: www.bort.com/conformity

Seisuga: 10.2025

 Meditsiiniseade |  Ühel patsiendil korduvalt kasutatav

Dziękujemy za zaufanie firmie BORT GmbH i jej wyrobom medycznym. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lekarzem lub dostawcą, od którego otrzymali Państwo niniejszy wyrób medyczny.

Przeznaczenie

Niniejszy wyrób medyczny to orteza stopowo-goleniowa służąca do całkowitej immobilizacji okolicy stopowo-goleniowej w wybranej pozycji.

Wskazania

Przed- lub pooperacyjne/pourazowe unieruchomienie okolicy przodostopia i śródstopia, złamanie śródstopia, urazy tkanek miękkich, skręcenia.

Przeciwwskazania

Ryzyko zakrzepicy, zaawansowane żylaki, choroba tętnic obwodowych, zaburzenia odpływu limfy oraz obrzęki tkanek miękkich niejasnego pochodzenia występujące odsiebnie od zastosowanej pomocy ortopedycznej, zaburzenia czuciowe i krążenia w zaopatrywanej okolicy ciała, choroby skóry w zaopatrywanej części ciała.

Ryzyko związane z użytkowaniem / Ważne wskazówki ⚠

Niniejszy wyrób medyczny może zostać przepisany na receptę. Prosimy o konsultowanie czasu i sposobu użytkowania z lekarzem przepisującym. Wykwalifikowany personel, od którego otrzymają Państwo wyrób medyczny, pomoże w wyborze odpowiedniego rozmiaru i poinstruuje, jak go użytkować.

- zdjąć wyrób medyczny przed badaniem radiologicznym
- orteza typu walker przeznaczona jest do maksymalnej masy ciała wynoszącej do 130 kg
- jeżeli zalecono zakładanie na noc, unikać niekorzystnego wpływu na układ krążenia
- w przypadku wystąpienia drętwienia poluzować lub w razie potrzeby zdjąć wyrób medyczny
- jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem lub dostawcą
- użytkować wyrób medyczny zgodnie ze wskazaniami
- jednoczesne stosowanie innych produktów dozwolone jest wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym
- nie wprowadzać żadnych zmian w wyrobie medycznym
- nie użytkować na ranach otwartych
- nie użytkować w przypadku nietolerancji któregośkolwiek z użytych materiałów
- nie użytkować ponownie w przypadku innego pacjenta – niniejszy wyrób medyczny przeznaczony jest do użytku tylko przez jednego pacjenta
- w okresie noszenia ortezy: nie stosować kremów ani maści w obszarze zastosowanego środka pomocy ortopedycznej – może zniszczyć materiał

Instrukcja zakładania

Podczas noszenia ortezy należy nosić na chorej stopie jedną z dwóch dołączonych poręczach pod ortezę. Sprawdzić, czy nie ma zagniebień.

1 Następnie odpiąć poprowadzone okrężnie zapięcia na rzepy i zdjąć osłonkę przednią. Aby usprawnić późniejsze zakładanie ortozy, zaleca się obrócenie taśm rzepowych w dół, co ułatwi wsunięcie kończyny w ortezę.

2 Odpiąć wyścielaną podszewkę i umieścić stopę i gołeń w ortezie typu Walker. Upewnić się, że pięta jest dobrze osadzona – powinna spoczywać w łusce na piętę, dosunięta całkowicie do tyłu. Następnie zapiąć na rzepy wyścielaną podszewkę na stopie i w obszarze goleni, uważając, by nie powstały zagniecenia.

Wskazówka dla techników:

Ustawianie długości stopy:

W razie potrzeby można dopasować długość stopy odpowiednio do pacjenta, przestawiając pałąk przy palcach.

W tym celu należy pałąk unieść i odblokować, delikatnie pociągając w górę.

Następnie można go przesunąć i zablokować w wymaganym położeniu, lekko naciskając w dół.

3 Dopasować teraz szarą, przednią osłonkę, umieszczając ją z powrotem na środku wyścielanej podszewki. Pompka jest do niej przymocowana na rzep i powinna być umieszczona w centralnym wgłębieniu z przodu. W razie potrzeby można skorygować położenie pompki na wyścielanej podszewce.

Zapiąć cztery poprowadzone okrężnie zapięcia na rzepy w podanej niżej kolejności:

1. Rozpocząć od zapięcia na stawie skokowym.
2. Zamknąć zapięcie na goleni.
3. Zapiąć pasek w obrębie śródstopia/palców stopy.

Ewentualnie ponownie wyregulować napięcie.

4 Aby wtłoczyć powietrze do podszewki i w ten sposób stworzyć stabilizację, należy kilka razy nacisnąć pompkę, aż będzie odczuwalna powierzchniowa stabilizacja w obszarze goleni i stopy. W razie potrzeby jeszcze raz naprężyć taśmy zapięcia.

Zakres dostawy:

BORT X-Walker AIR krótka oraz:

- Podszewka X-Walker AIR krótka
- Pończocha pod ortezę Walker (para)

Dostępny osprzęt:

REF 100 370 BORT Pończocha pod ortezę Walker

REF 100 380 BORT Pokrowiec wodoodporny

REF 100 390 BORT Pokrowiec ochronny na noc

Zdejmowanie

5 Przed zdjęciem pomocy ortopedycznej usunąć kapturek osłonowy z boku pompki i nacisnąć mosiężny przycisk. Teraz będzie można usłyszeć, jak powietrze wypływa z wyścielanej podszewki. Następnie poluzować taśmy, usunąć przednią osłonę, otworzyć podszewkę i zdjąć ortezę z nogi. Zapiąć wszystkie rzepy, aby nie uszkodzić np. innych ubrań.

Skład

Łuska ortozy:	100 % polipropylen (PP)
Podszewka (powłoczka):	35 % poliester (PES), 35 % bawełna (CO), 30 % estry poliuretanowe (PUR)
Zapięcia:	100 % poliamid (PA)
Pończochy:	88,5 % bawełna (CO), 9,0 % poliamid (PA), 2,5 % elastan (EL)

Wskazówki dotyczące czyszczenia

 Prac ręcznie 30 °C  Nie wybielać (prać tylko z zastosowaniem środków do tkanin łagodnych lub kolorowych)  Nie suszyć w suszarce  Nie prasować  Nie czyścić chemicznie

Łuskę ortozy umyć ręcznie w letniej wodzie, podszewkę wyprać ręcznie w temp. maks. 30°C, używając łagodnego środka do prania tkanin delikatnych. Suszyć na powietrzu, unikać wysokiej temperatury.

Gwarancja

W przypadku niniejszego produktu mają zastosowanie przepisy kraju, w którym został on zakupiony. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dostawcą, u którego zakupili Państwo produkt. Prosimy o wyczyszczenie produktu przed złożeniem do reklamacji. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może skutkować ograniczeniem lub utratą gwarancji. Nie udziela się gwarancji w przypadku użytkowania niezgodnego ze wskazaniami, nieprzestrzegania ryzyka związanego z zastosowaniem i instrukcji użytkowania lub wprowadzania zmian w produkcie.

Czas użytkowania/Trwałość produktu

Trwałość wyrobu medycznego zależy od naturalnego zużycia przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z instrukcją użytkowania.

Obowiązek zgłaszania incydentów

Jeśli podczas użytkowania wyrobu medycznego dojdzie do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, należy poinformować dystrybutora lub nas jako producenta oraz Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nasze dane kontaktowe znajdują się w niniejszej instrukcji użytkowania. Dane kontaktowe właściwego organu krajowego w danym kraju można znaleźć, klikając na poniższy link: www.bort.com/md-eu-contact.

Utylizacja

Po użyciu produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Deklaracja zgodności

Potwierdzamy, że ten produkt spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745. Aktualna deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym linkiem:
www.bort.com/conformity

Stan na: 10.2025

MD Wyrób medyczny |  Wielokrotne użycie u jednego pacjenta

Vă mulțumim pentru încrederea acordată unui dispozitiv medical produs de BORT GmbH. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau comerciantului de la care ați achiziționat dispozitivul medical.

Destinația de utilizare

Acest dispozitiv medical este o orteză pentru gambă și laba piciorului pentru imobilizarea completă a regiunii respective într-o poziție predeterminată.

Indicații

Imobilizare preoperatorie sau postoperatorie/posttraumatică a părții anterioare a labei piciorului și a regiunii metatarsiene, fractură metatarsiană, vătămări la nivelul țesutului moale, entorse.

Contraindicații

Risc de tromboză, varicoză acută, boală arterială ocluzivă periferică (BAOP), afecțiuni de drenaj limfatic, umflarea țesuturilor moi din cauze neclare distal față de dispozitivul medical auxiliar aplicat, perturbări senzoriale și ale circulației sanguine la nivelul regiunii tratate a corpului, boli cutanate la nivelul regiunii tratate.

Riscuri asociate utilizării/indicații importante ⚠

Acest dispozitiv medical este un produs disponibil pe bază de prescripție. Discutați despre modul de utilizare și durata utilizării cu medicul dumneavoastră curant. Personalul specializat de la care ați primit dispozitivul medical va selecta dimensiunea adecvată a acestuia și vă va oferi instruire cu privire la modul de utilizare.

- îndepărtați dispozitivul medical înaintea examinărilor radiologice
- dispozitivul Walker este adecvat pentru o greutate corporală de maxim 130 kg
- în cazul în care este prescrisă purtarea dispozitivului pe parcursul nopții, evitați afectarea sistemului circulator
- în cazul unor senzații de amorțeală, slăbiți dispozitivul medical sau îndepărtați-l, dacă este necesar
- contactați medicul sau comerciantul, dacă simptomele persistă
- utilizați dispozitivul medical conform indicațiilor
- utilizarea simultană a altor produse este permisă numai după consultarea cu medicul dumneavoastră
- nu modificați produsul
- nu aplicați produsul pe plăgi deschise
- nu utilizați produsul în cazul intoleranței la unul dintre materialele componente
- produsul nereutilizabil – acest dispozitiv medical auxiliar este destinat tratamentului unui singur pacient
- în timpul purtării ortezei: nu aplicați creme sau unguente în regiunea unde este fixat dispozitivul medical auxiliar – în caz contrar, este posibilă deteriorarea materialului din care este confecționat produsul

Instrucțiuni privind aplicarea produsului

În timpul purtării ortezei, vă rugăm să utilizați unul dintre cei doi ciorapi speciali incluși în pachetul de livrare pe laba piciorului afectat. Asigurați-vă că nu există cute la nivelul materialului.

1 Desfaceți sistemele de închidere cu scai circulare și îndepărtați capacul frontal. Pentru a facilita punerea ulterioară, se recomandă să întoarceți benzile cu scai în jos pentru a ușura introducerea piciorului în orteză.

2 Desfaceți căptușeala și introduceți laba piciorului și gamba în dispozitivul Walker. Asigurați poziționarea corectă a călcâiului; acesta trebuie să fie poziționat chiar în spate, bine fixat în cupa pentru călcâi. Apoi închideți căptușeala cu ajutorul sistemului de închidere cu scai de pe laba piciorului și din zona gambei, asigurându-vă că nu există cute la nivelul materialului.

Indicație pentru tehnician:

Reglarea lungimii tălpii:

Dacă este necesar, lungimea tălpii poate fi adaptată la caracteristicile fizice individuale ale pacientului prin deplasarea baretei pentru degete.

Pentru a face acest lucru, bareta pentru degete este ridicată și deblocată prin tragerea ușoară a acesteia în sus.

Aceasta poate fi apoi deplasată și blocată în poziția dorită prin apăsarea ușoară în jos.

3 Adaptați capacul frontal de culoare gri la nivelul căptușelii, în poziție centrală. Pompa este atașată la aceasta și trebuie poziționată în decupajul central al ansamblului frontal. Dacă este necesar, puteți corecta poziția pompei pe căptușeală.

Închideți cele patru sisteme de închidere cu scai circulare în următoarea ordine:

1. Începeți cu sistemul aflat la nivelul articulației gleznei.
2. Închideți sistemul aflat la nivelul gambei aproape de genunchi.
3. Închideți cureaua în zona metatarsului/degetelor de la picioare.

Dacă este necesar, strângeți din nou sistemele cu scai.

4 Pentru a pompa aer în căptușeală și a asigura astfel stabilizarea, acționați pompa de câteva ori până când simțiți o stabilizare locală în zona gambei și a labei piciorului. Dacă este necesar, strângeți din nou benzile de închidere.

Pachet de livrare:

BORT X-Walker AIR varianta scurtă, inclusiv:

- Căptușeală X-Walker AIR, varianta scurtă
- Ciorapi speciali Walker (pereche)

Accesorii disponibile:

REF 100 370 BORT Ciorapi speciali Walker

REF 100 380 BORT Husă de protecție împotriva umezelii

REF 100 390 BORT Husă de protecție pentru noapte

Îndepărtarea produsului

5 Pentru îndepărtarea dispozitivului auxiliar, scoateți capacul de pe partea laterală a pompei și apăsați în jos butonul de culoarea alamei. Acum se poate auzi cum aerul iese din căptușeală. Apoi deschideți curelele, scoateți capacul frontal și deschideți căptușeala pentru a scoate orteza de pe picior. Închideți toate sistemele de închidere cu scai pentru a evita deteriorările, de exemplu la nivelul altor articole de îmbrăcăminte.

Compoziție

Carcasa ortezei:	100 % polipropilenă (PP)
Căptușeală (husă):	35 % poliester (PES), 35 % bumbac (CO), 30 % ester poliuretan (PUR)
Sisteme de închidere:	100 % poliamidă (PA)
Ciorapi speciali:	88,5 % bumbac (CO), 9,0 % poliamidă (PA), 2,5 % elastan (EL)

Indicații privind curățarea

 Spălare manuală 30 °C  A nu se folosi înălbitor (a se spăla numai cu detergenți pentru rufe colorate sau delicate)  A nu se usca prin centrifugare  A nu se călca  A nu se curăța chimic
Curățați carcasa ortezei manual cu apă caldă și spălați husa căptușelii cu detergenți pentru rufe delicate, la maximum 30 °C. Lăsați să se usuce la aer și evitați astfel expunerea la căldură.

Garanție

Se aplică prevederile legale din țara în care a fost achiziționat produsul. Pentru eventuale pretenții de garanție, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să curățați produsul înaintea formulării unei pretenții de garanție. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate afecta condițiile de acordare a garanției sau poate duce la anularea acesteia. Garanția este exclusă în cazul utilizării produsului în mod contrar indicațiilor, dacă nu sunt luate în considerare riscurile asociate utilizării, în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare, precum și în cazul modificărilor neautorizate la nivelul produsului.

Durata de utilizare/durata de viață a produsului

Durata de viață a produsului este determinată de uzura naturală în cazul utilizării acestuia în mod corespunzător și conform recomandărilor.

Obligația de notificare

Aveți obligația de a notifica distribuitorului specializat de la care a fost achiziționat produsul sau producătorului, precum și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale orice eveniment care duce la agravarea semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate în timpul utilizării acestui dispozitiv medical.

Datele noastre de contact sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare. Pentru datele de contact ale autorității naționale competente din țara dumneavoastră, vă rugăm să accesați următorul link: www.bort.com/md-eu-contact.

Eliminare ca deșeu

La finalul duratei de viață, produsul trebuie eliminat ca deșeu conform reglementărilor locale aplicabile.

Declarației de conformitate

Confirmăm faptul că acest produs corespunde cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Pentru varianta actuală a declarației de conformitate, accesați următorul link: www.bort.com/conformity

Versiunea: 10.2025

MD Dispozitiv medical |  Un singur pacient – utilizare multiplă

BORT X-Walker AIR kurz

Gebrauchsanweisung



PDF: ga.bort.com



BORT GmbH

Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | www.bort.com



D101250/2025-10/003 ML | Rev. 01

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.